


ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ
НАБОРА (SET) ОТ КОНЕКТБИОФАРМ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИИМПЛАНТИТА,
В СЛУЧАЕ ДЕФИЦИТА КОСТИ
С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ

ВАРИАНТ 1


SET BioGap Bioguard

BIOGAP SET BIOGUARD

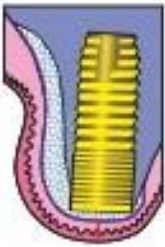


Кат №		Объем	Размер				Цена (набора) руб.
			$\varnothing$	h	l	b	
40600	Диск	0,3 см ³	10 мм	3 мм			3840
	Мембрана				25 мм	15 мм	


ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ С ДЕФИЦИТОМ КОСТИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ

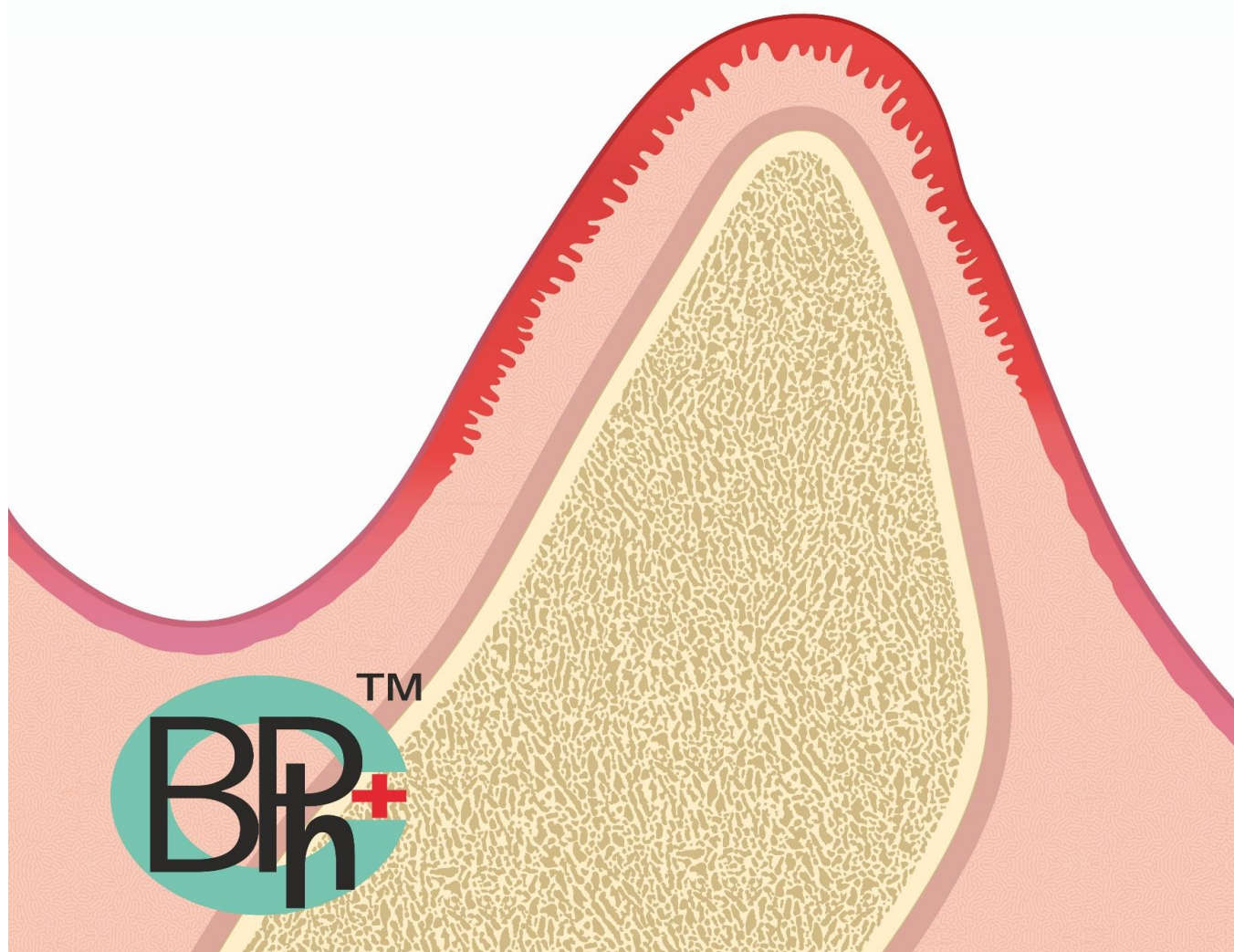


ПЛАНИРУЕМОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

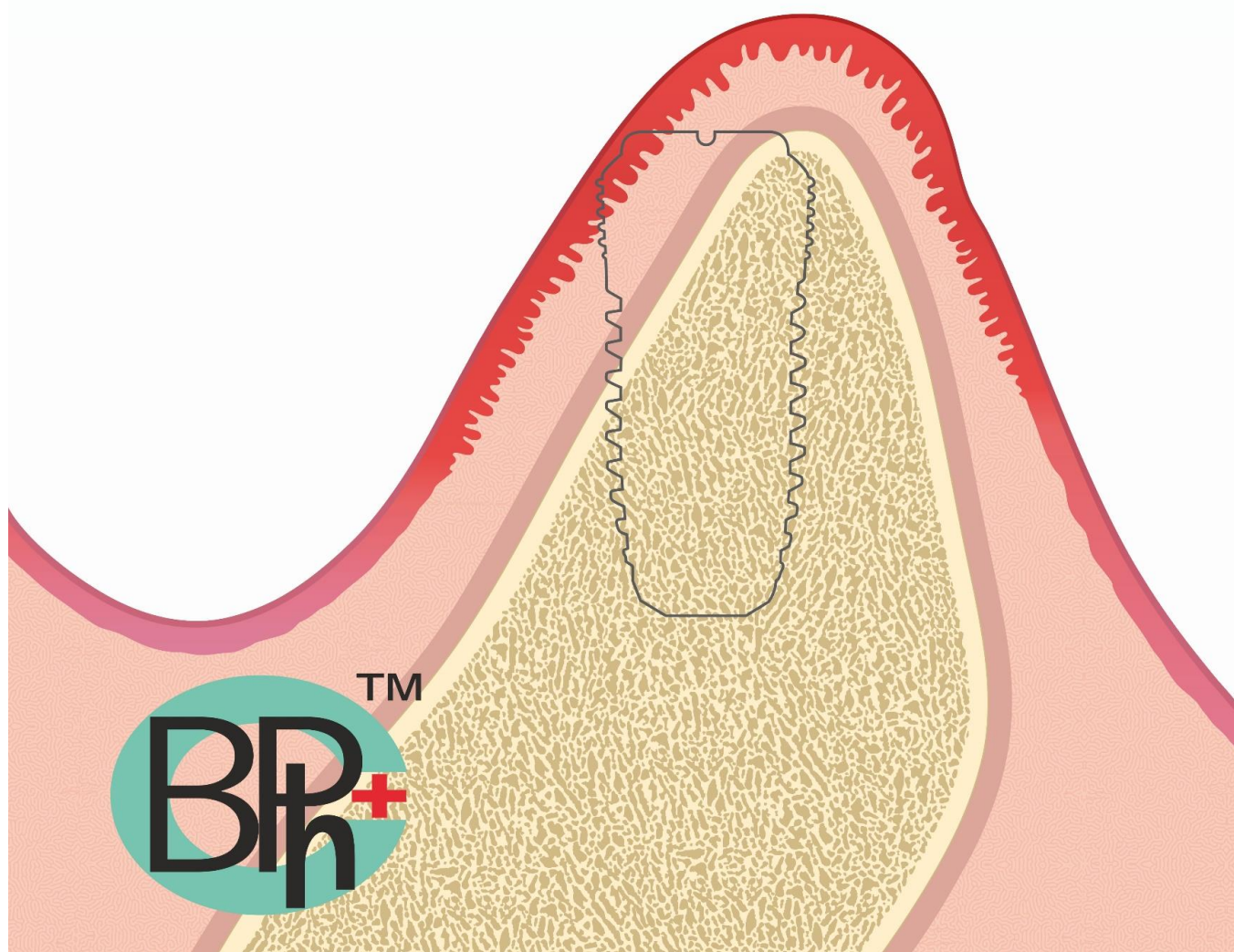


**ПРОИЗВОДИМ РАЗРЕЗ ПО СЕРЕДИНЕ -
«БЕЛОЙ ЛИНИИ» ГРЕБНЯ**

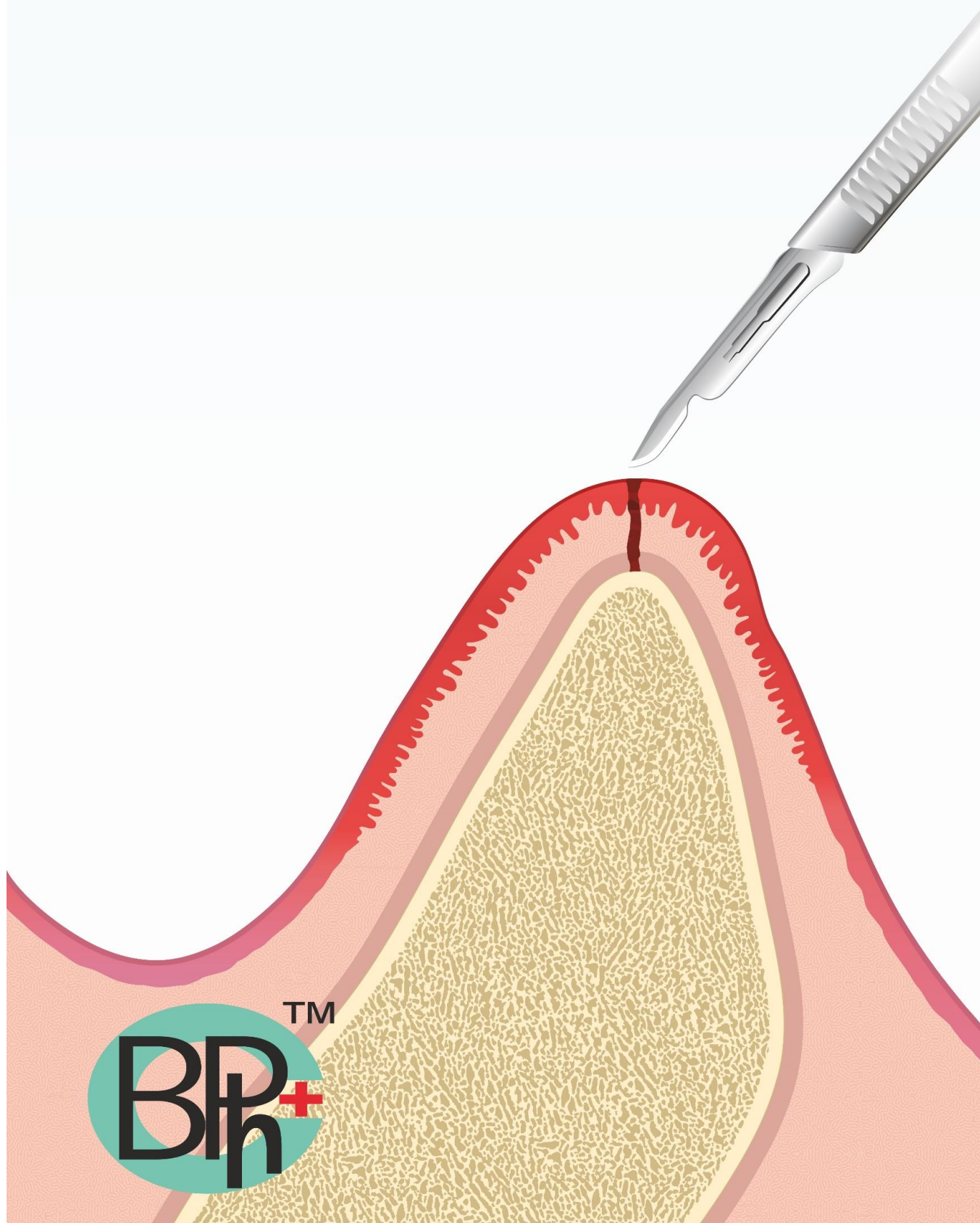


**СЕПАРИРУЕМ СЛИЗИСТУЮ ВЕСТИБУЛЯРНО
ДО ГРАНИЦЫ ПРИКРЕПЛЕННОЙ СЛИЗИСТОЙ**
*** С ЯЗЫЧНОЙ СТОРОНЫ НЕ БОЛЕЕ 7мм**

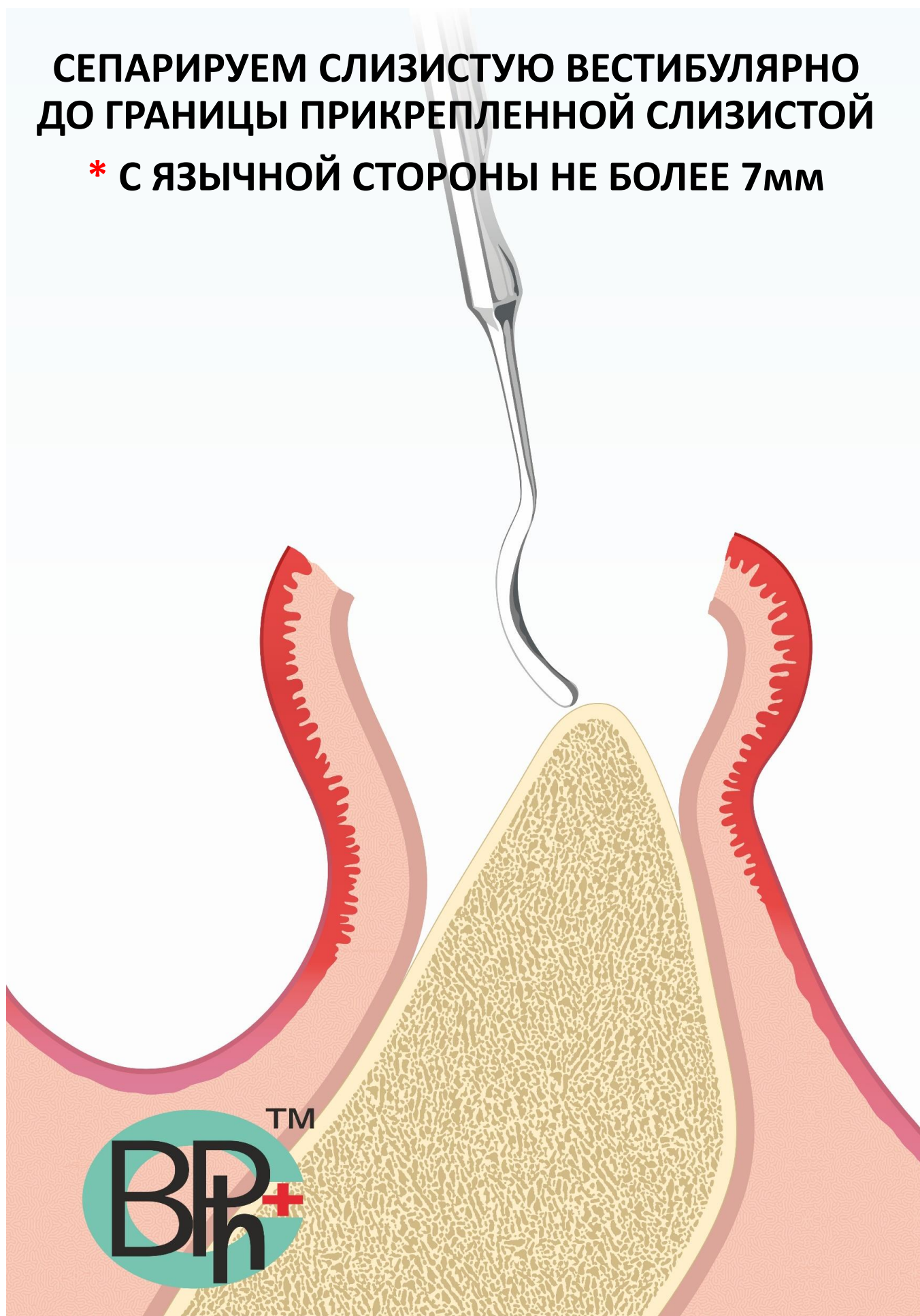


**ФОРМИРУЕМ «РАСЩЕПЛЁННЫЙ ЛОСКУТ»
С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ НА ГРАНИЦЕ
ПЕРЕХОДА НЕПОДВИЖНОЙ В ПОДВИЖНУЮ
СЛИЗИСТУЮ НАДРЕЗАЕМ НАДКОСТНИЦУ**

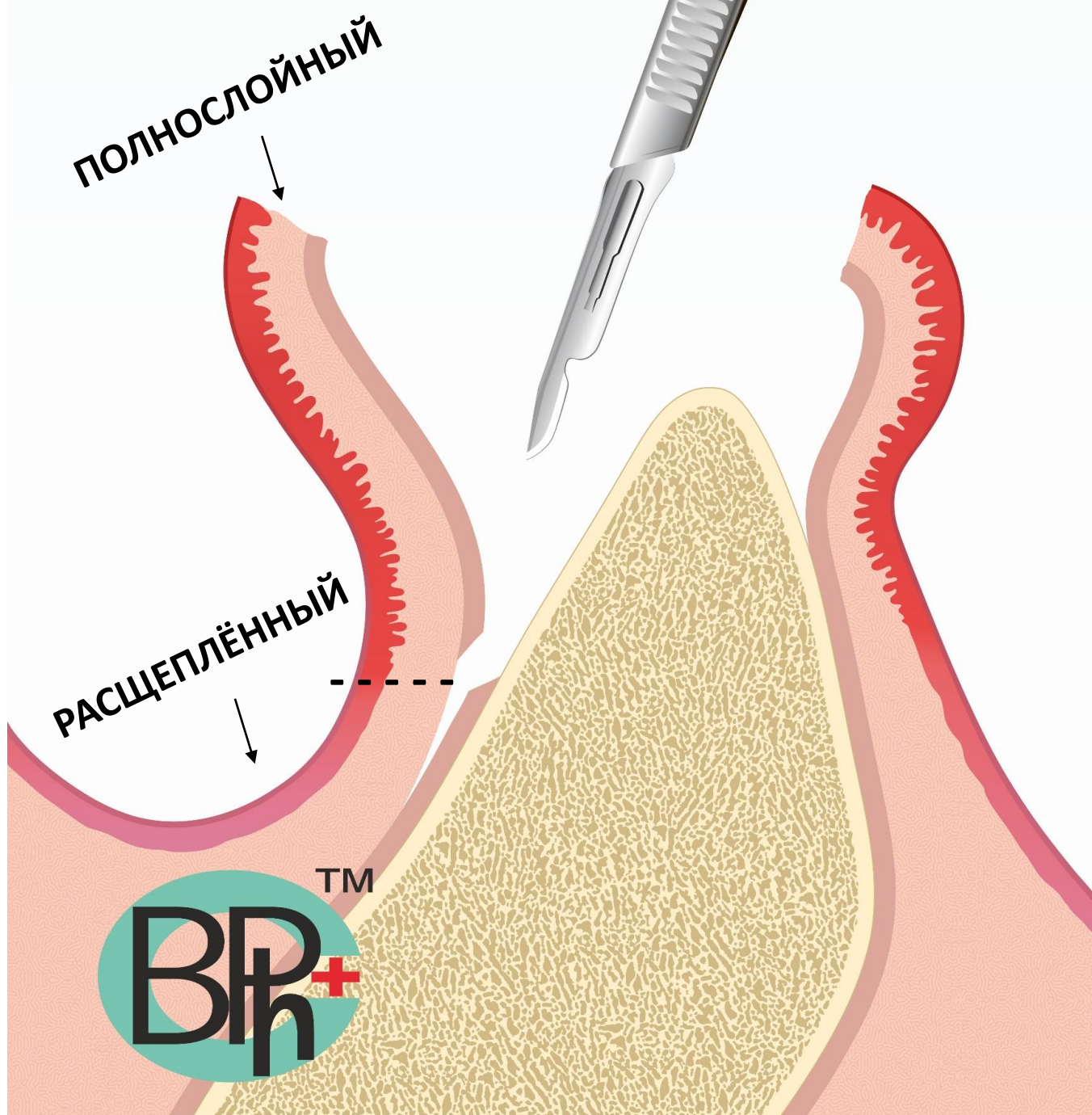


**ТУПЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОТДЕЛЯЕМ
МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ ОТ НАДКОСТНИЦЫ**

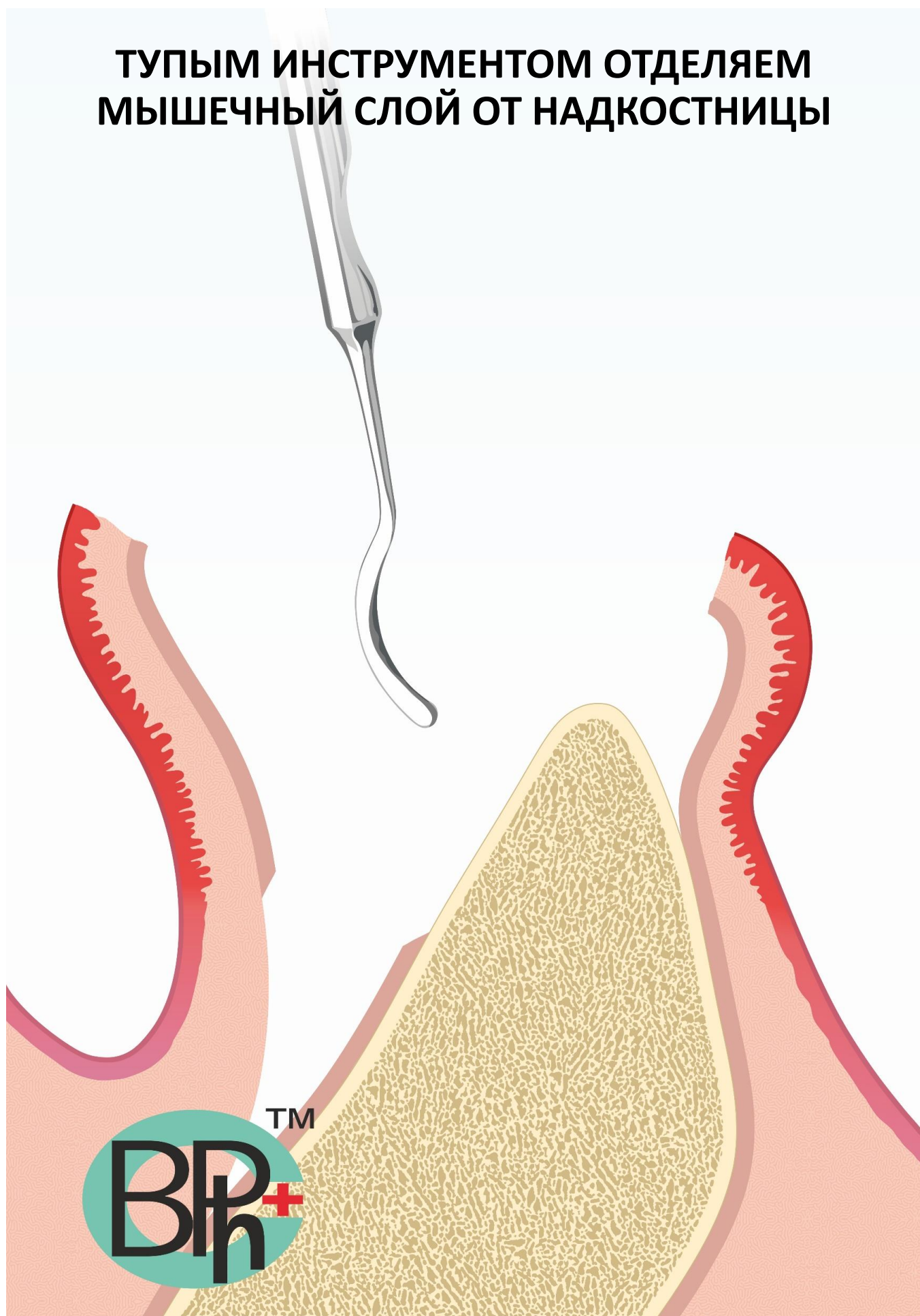


**ОТСЛАИВАЕМ НАДКОСТНИЦУ ОТ КОСТИ,
ФОРМИРУЕМ ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ КАРМАН
ДЛЯ МЕМБРАНЫ, ЧУТЬ НИЖЕ УРОВНЯ АПЕКСА
БУДУЩЕГО УСТАНОВЛЕННОГО ИМПЛАНТАТА**

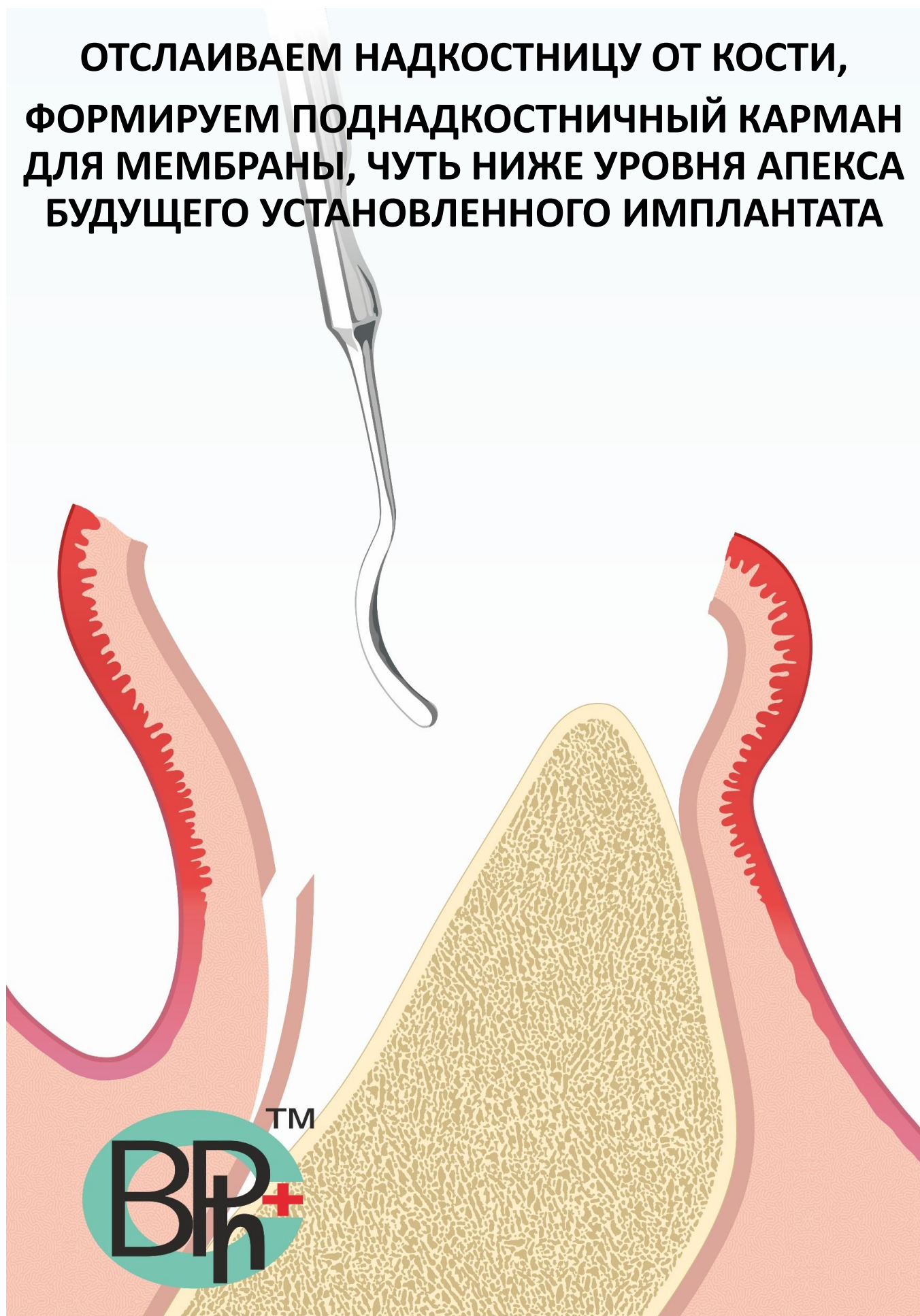


ФОРМИРУЕМ ЛОЖЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

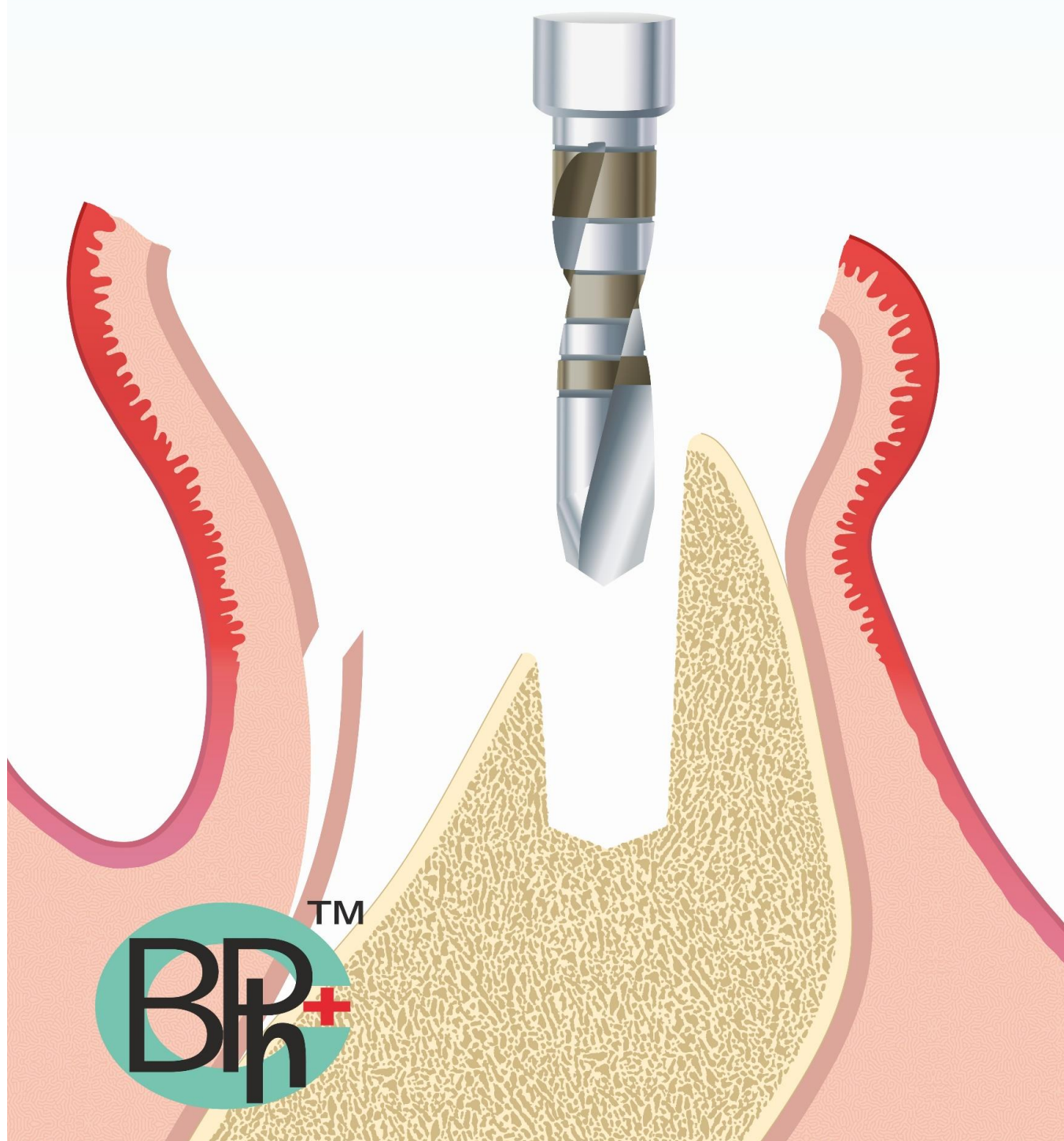


УСТАНАВЛИВАЕМ ИМПЛАНТАТ

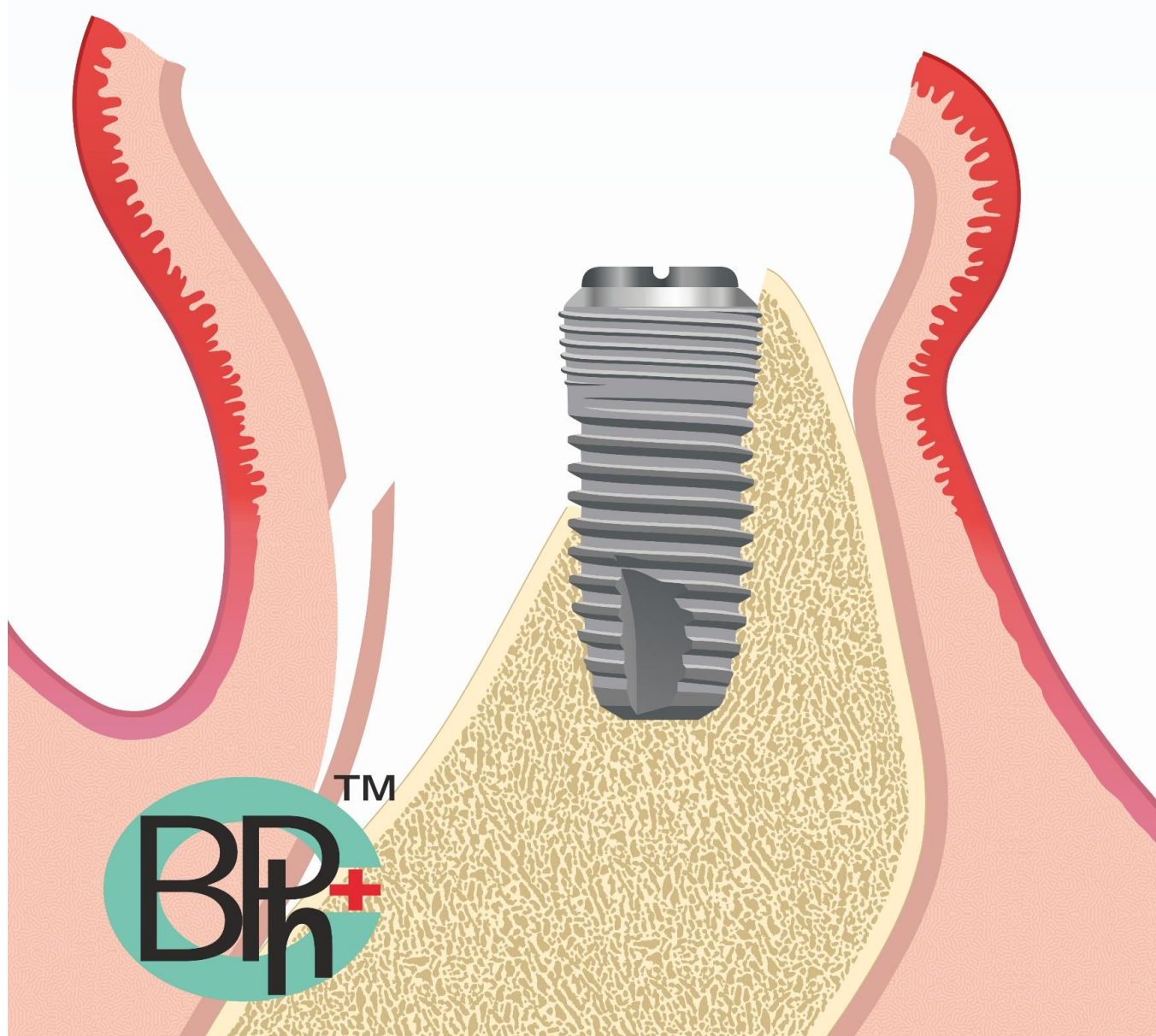


УКЛАДЫВАЕМ МЕМБРАНУ

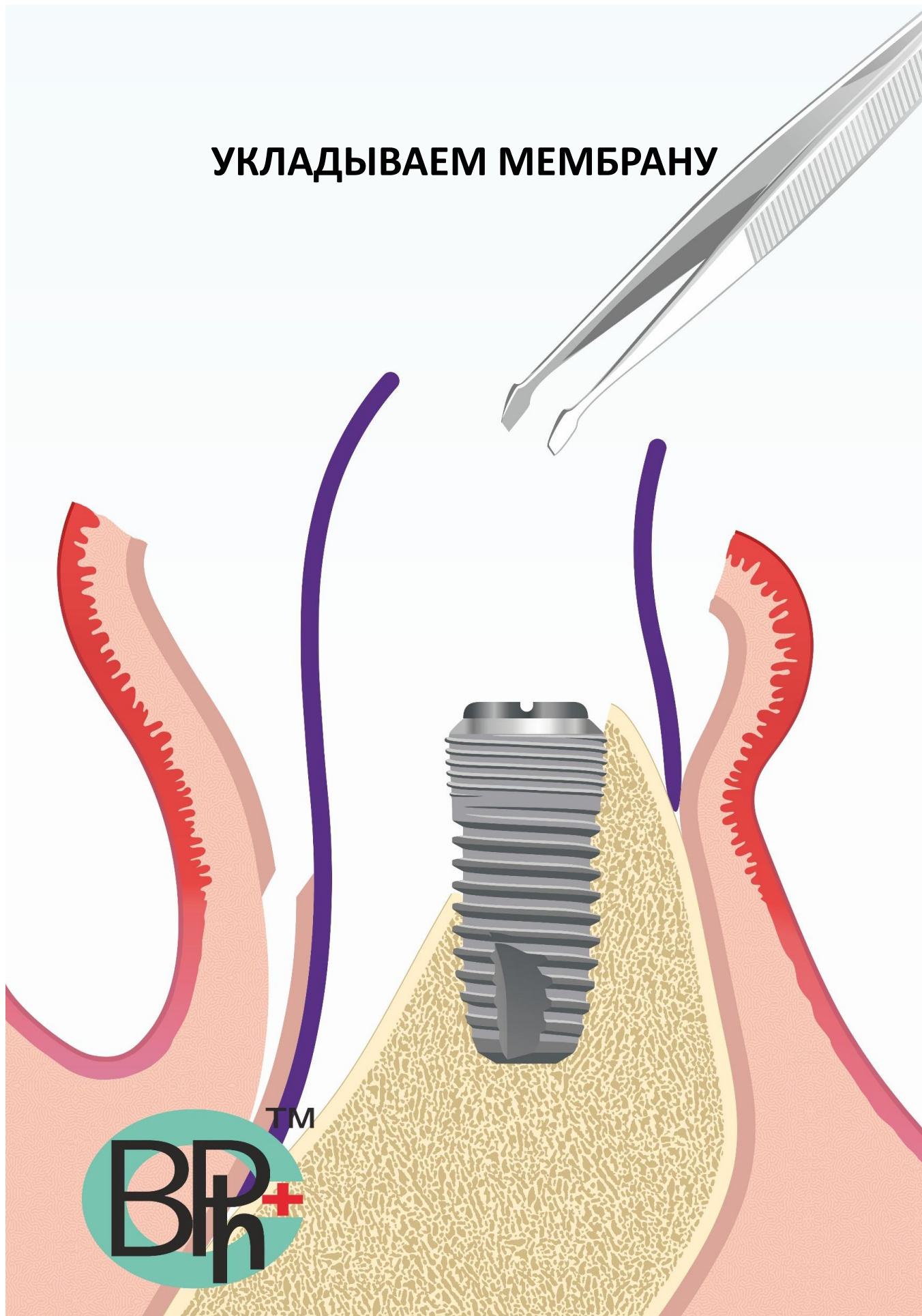


ПРИ ПОМОЩИ **ОСТЕОКОНДУКТИВНОГО**
МАТЕРИАЛА ВОССТАНАВЛИВАЕМ УТРАЧЕННЫЙ
ОБЪЁМ КОСТИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ И
ЗАЩИЩАЕМ ИМПЛАНТАТ ОТ ФИБРОИНТЕГРАЦИИ,
А КОСТЬ ОТ РЕЗОРБЦИИ

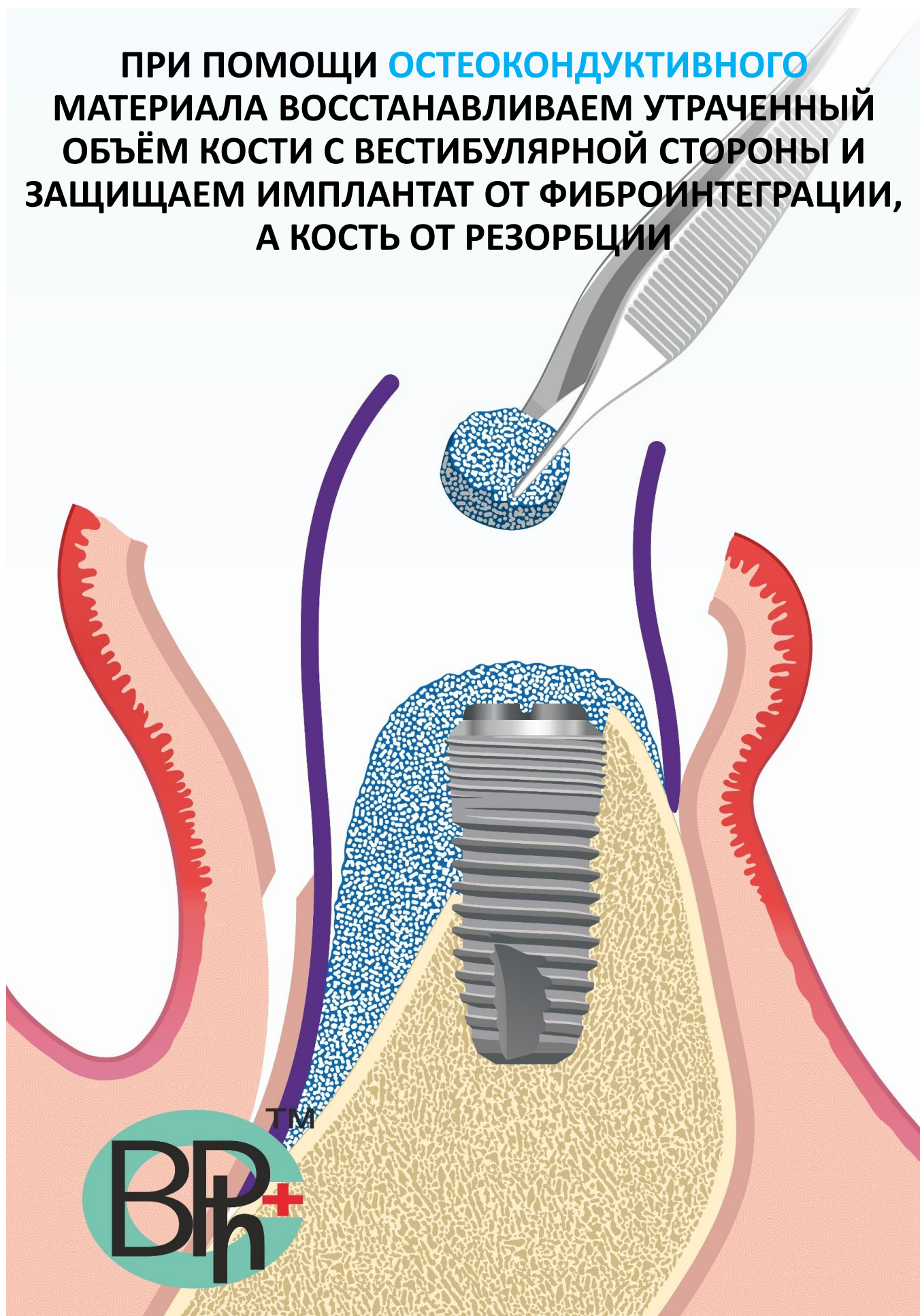


**«СХЛОПЫВАЕМ» МЕМБРАНУ
ПО ПРИНЦИПУ «ПАЛЬТО»**

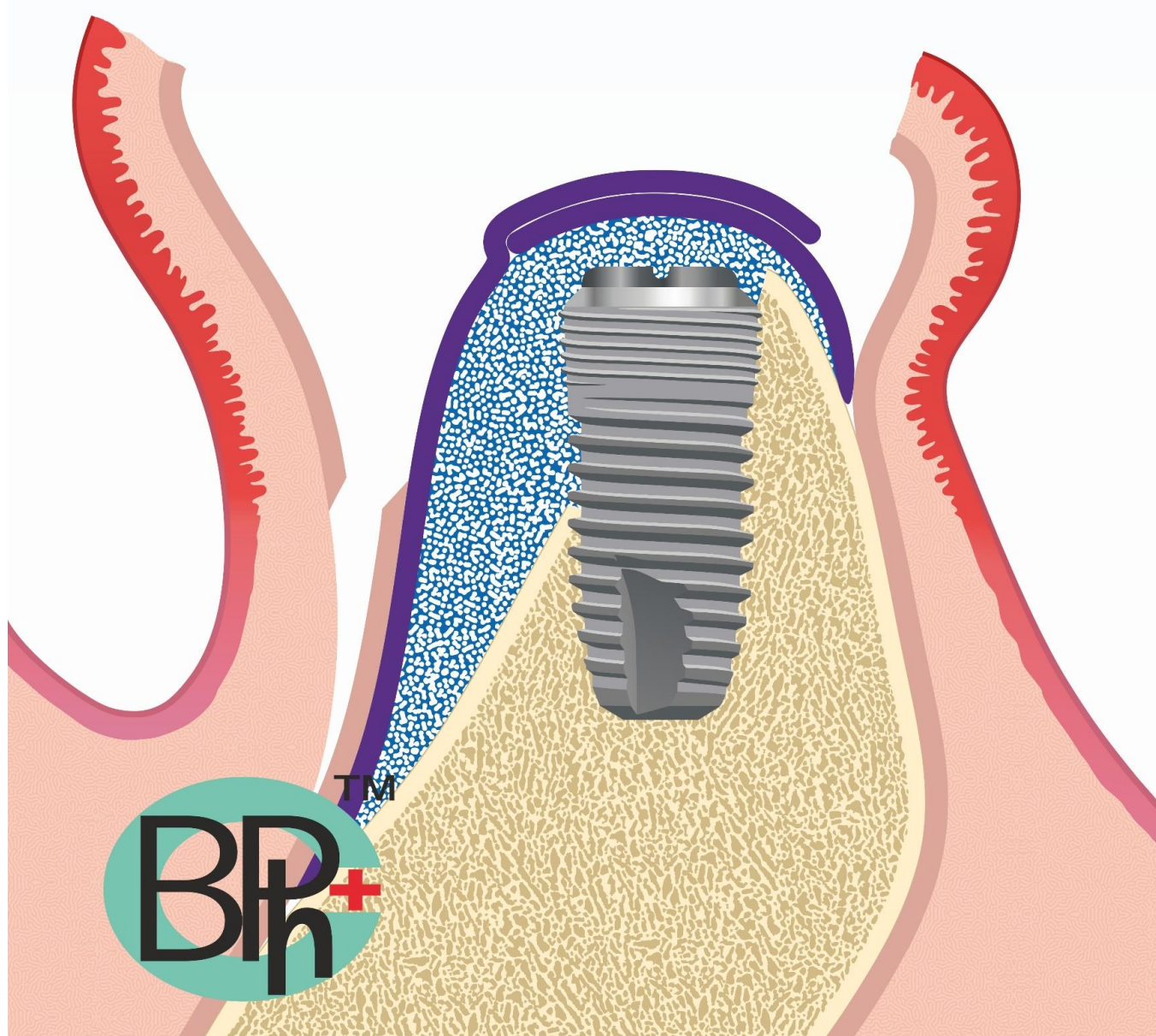

СВОДИМ КРАЯ СЛИЗИСТОЙ

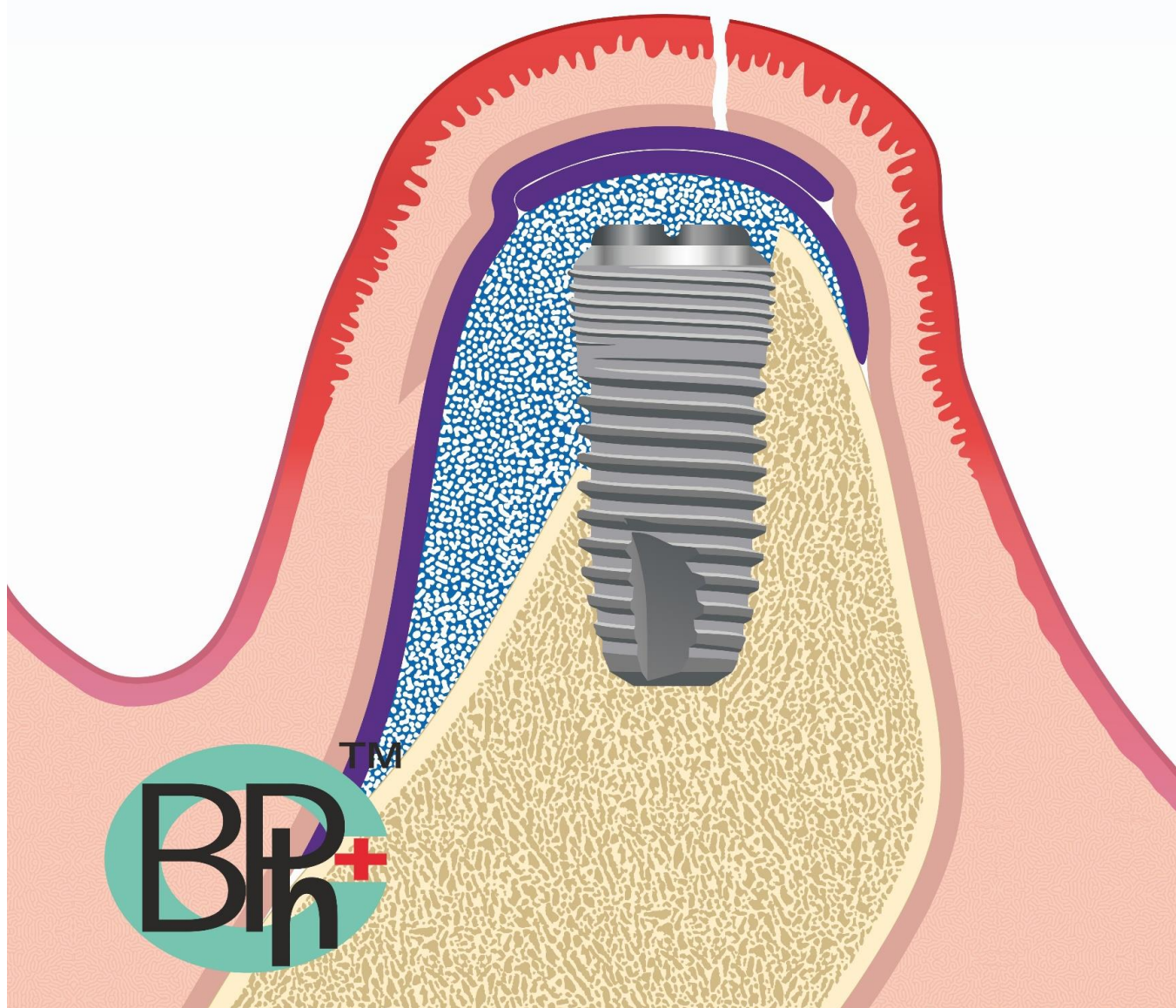


УШИВАЕМ СЛИЗИСТУЮ

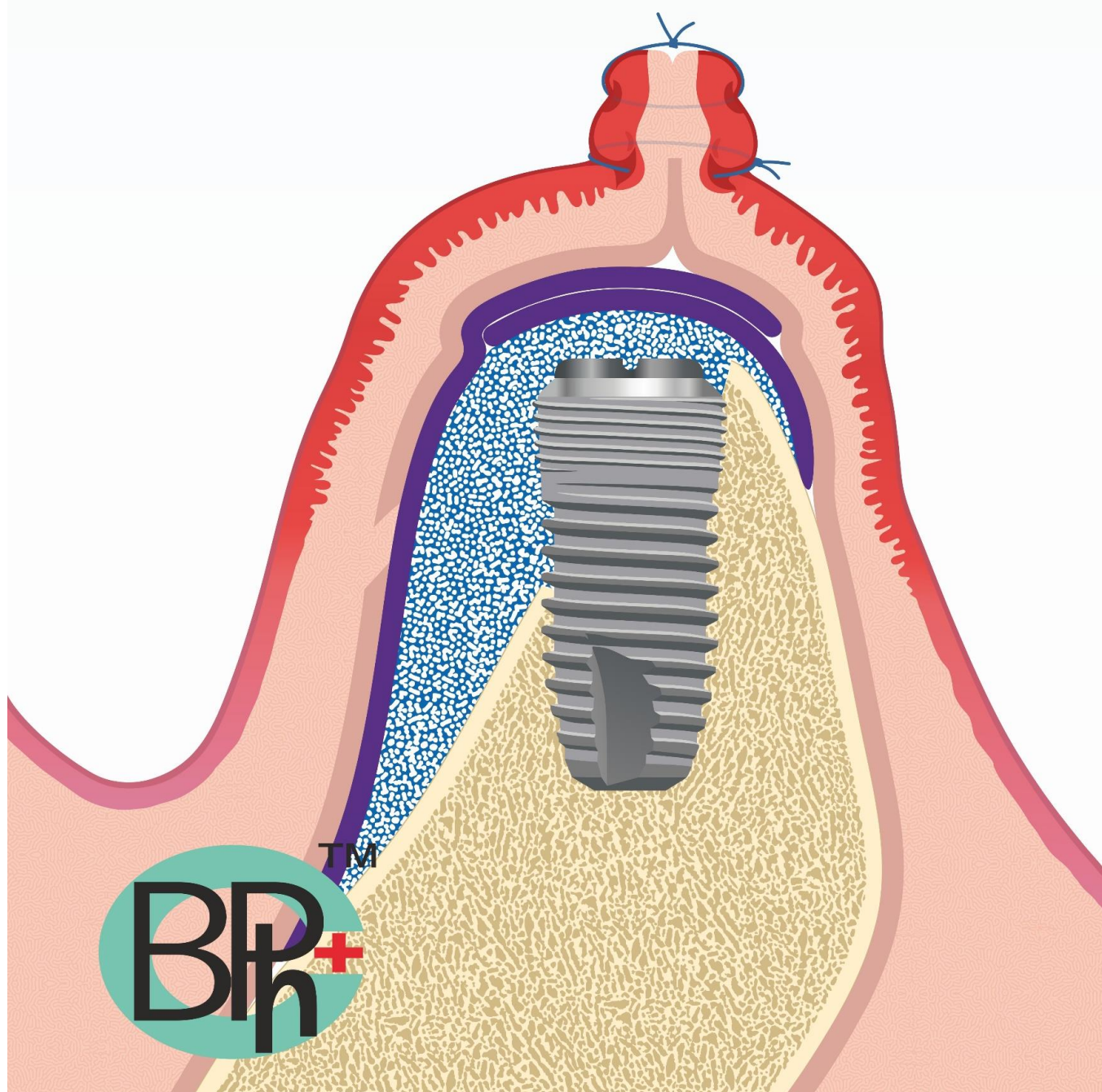

**ВАРИАНТ УШИВАНИЯ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИШТВАНОМ УРБАНОМ
И НАОШИ САТО**



**СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ
ПРОТОКОЛ ЗДЕСЬ**

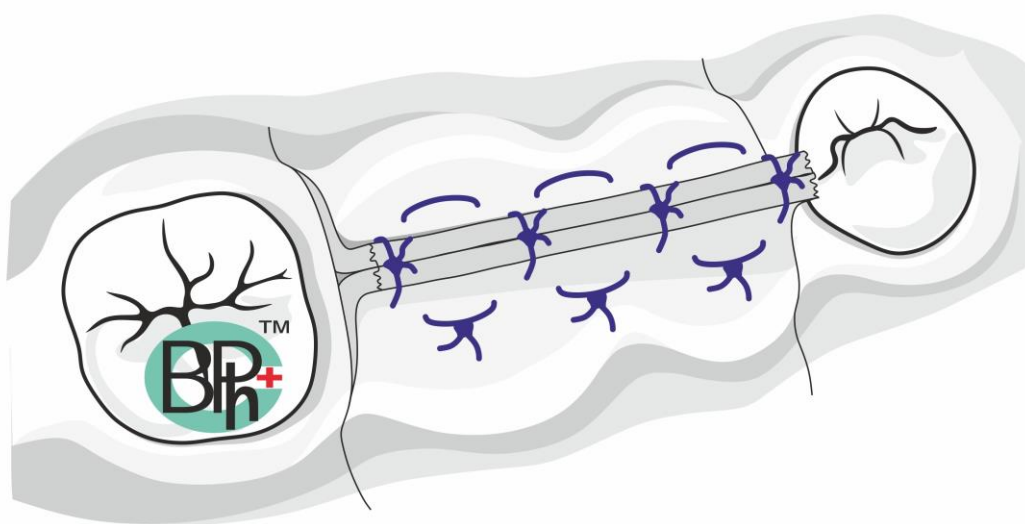

РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

